

DIRECTIONS FOR USE

- Pretreatment of the material to be bonded. Perform appropriate pretreatment for each material to be bonded (composite resin, porcelain, metal or natural tooth).
 - Follow the instructions of each pretreatment material.
- Setting of the Needle Tip
 - Follow the instructions below to attach the BEAUTIFIL Needle Tip provided.
 - Pull off the shield cap while turning it slowly. (Fig.A)
 - Attach the needle tip by turning it clockwise until it is securely attached. (Fig.B)
 - Wear clean medical (dental gloves) when replacing the needle tip.

Application
Apply necessary amount of BEAUTIFIL OPAQUER directly to the material to be bonded. BEAUTIFIL OPAQUER may also be extruded onto a paper pad to be applied with a suitable instrument.

- When storing these materials in a refrigerator, allow them to reach room temperature before use.
- The paste dispensed onto the paper pad should be shielded from ambient light by light-shielding cover to avoid unintended polymerization of the material.
- BEAUTIFIL OPAQUER should be applied as thinly as possible (0.5 mm or less)
- Needle tips should be used for only one patient and then discarded at the end of the procedure to avoid cross contamination.

Light-curing
Light-cure using a dental light-curing unit.
When applying thickly, incremental placement and light-curing are required.

- When the cavity surface or the area to be repaired is large, light-cure in segments.
- Dental light-curing unit and light-curing time

Light-curing unit	Halogen	LED
Light-curing time	40 sec.	20 sec.
Wavelength	400-500 nm	440-490 nm
Light Intensity	≥ 500 mW/cm ²	≥ 1000 mW/cm ²

- Use a dental light-curing unit having specifications equivalent to those described above. When using the one having performance other than these recommendations, follow the instructions of each unit to light-cure BEAUTIFIL OPAQUER properly.
- Operators must use protective glasses or light shielding plate to avoid looking directly at the curing light. Operators must also protect patients' eyes from direct exposure to curing light.
- Disinfect the syringe and shield cap with alcohol after each use to avoid cross-contamination. Then, lightly close the cap. Use caution to avoid including alcohol into the paste.
- Disinfect the light-curing unit with alcohol after each use to avoid cross-contamination.

5. Fill direct composite resin and light-cure. Then, contour, finish and polish.
Follow the direct restorative manufacturer's instructions for use.

NOTE ON USE

- Follow the instructions for use of each dental material or instrument to be used in conjunction with this product.
- Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in these instructions for use.
- Use this product within the expiration date indicated on the package or container.
(Example □ YYYY-MM-DD → Year-Month-Date of the expiration date)

STORAGE

- Store in a dark place at room temperature (1-30 °C /34-86 °F). Avoid high temperatures and high humidity. Keep away from direct sunlight and any source of ignition.
- Discard the used Needle Tip and store this product in either way of the following.
 - Attach new one. Insert the needle into the small hole on the head of the shield cap. (Fig.C)
 - Replace the shield cap securely. (Fig.D)

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.



DE VOR GEBRAUCH SORGFALTIG DURCHLESEN

Fluoridfreisetendes, fließfähiges Restaurationsmaterial - Opaker

BEAUTIFIL OPAQUER ist ein lichthärtendes Opaker zur Abdeckung von verfärbten Zähnen sowie Metallen und Pulpaüberkappungsmaterialien.

FARBEN
ÜO (universal-opak), LO (hell-opak)

ZUSAMMENSETZUNG
Bis-GMA, TEGDMA, S-PRG Füller auf der Basis von fluorbororaluminosilikatglas, Polymerisationsinitiator, Pigmente u. a.

INDIKATIONEN

- Abdeckung von verfärbten oder fleckigen Zähnen
- Abdeckung von Metallfarben
- Abdeckung von Pulpenüberkappungen

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Das Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder Methacrylat-Monomere verwenden.
- Behandler mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder Methacrylat-Monomere dürfen das Produkt nicht benutzen.

3. Falls bei Patient oder Behandler Entzündungen oder andere allergische Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch einstellen und ärztlichen Rat einholen.

4. Zur Vermeidung einer Sensibilisierung gegen das Produkt (zahn-)medizinische Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei versehentlichem Kontakt mit oralen Weichgeweben oder Haut sofort mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch abtupfen und mit reichlich Wasser spülen. (Zahn-)medizinische Handschuhe bieten zwar einen gewissen Schutz vor direktem Kontakt mit diesem Material, doch einige Monomere können sehr schnell durch die Handschuhe auf die Haut dringen. Sollte das Material also auf die Schutzhandschuhe gelangen, diese sofort ausziehen und die Hände mit reichlich Wasser waschen.

5. Bei Kontakt mit den Augen diese sofort mit reichlich Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.

6. Dieses Produkt ist nur für den zahnärztlichen Gebrauch vorgesehen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Vorbereitung der Haftflächen
Bei allen beteiligten Materialien (Komposit, Keramik, Metall oder natürliche Zahnschubstanz) die Haftflächen entsprechend vorbehandeln.
 - Bei allen Materialien zur Vorbehandlung die entsprechenden Gebrauchsanleitungen beachten.
- Aufsetzen der Kanüle
Nach der folgenden Anleitung die beiliegende BEAUTIFIL Kanüle anbringen:
 - Die Schutzkappe unter langsamer Drehung abziehen (Fig. A).
 - Die Kanüle im Uhrzeigersinn anschrauben, bis sie sicher feststeht ist (Fig. B).
 - Beim Auswechseln der Kanüle saubere zahnärztliche Handschuhe tragen.

Die erforderliche Menge BEAUTIFIL OPAQUER direkt auf die Haftflächen auftragen. BEAUTIFIL OPAQUER kann aber auch auf ein Mischblock gegeben und mit einem geeigneten Instrument appliziert werden.

- Im Kühlschrank gelagertes Material erst verarbeiten, wenn es sich auf Zimmertemperatur erwärmt hat.
- Das auf den Mischblock ausgebrachte Material sollte mit einer Lichtschutzfolie vor Umgebungslicht geschützt werden, damit es nicht zu einer unbeabsichtigten Polymerisation des Materials kommt.
- BEAUTIFIL OPAQUER sollte möglichst dünn (0,5 mm oder weniger) aufgetragen werden.
- Die Kanülen dürfen nur bei jeweils einem Patienten verwendet werden und sind am Ende der Behandlung zu entsorgen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

Lichthärtung
Mit einer dentalen Polymerisationslampe licht härten.
Bei dicker Auftragung stufenweise auftragen und licht härten.

- Größflächige Füllungen oder Reparaturen in Segmenten licht härten.
- Polymerisationslampe und Polymerisationszeit

Polymerisationslampe	Halogen	LED
Polymerisationszeit	40 Sek.	20 Sek.
Wellenlänge	400-500 nm	440-490 nm
Lichtleistung	≥ 500 mW/cm ²	≥ 1000 mW/cm ²

- Eine dentale Polymerisationslampe mit den obigen technischen Merkmalen benutzen.
- Verwendung von Modellen mit anderen Leistungsmerkmalen die Gebrauchsanleitung der jeweiligen Lampe befolgen, damit BEAUTIFIL OPAKER korrekt lichtgehärtet wird.
- Der Behandler muss eine Schutzbrille tragen oder ein Lichtschuttschild verwenden, um nicht unmittelbar in das Licht der Polymerisationslampe zu blicken. Der Behandler muss auch die Augen des Patienten vor direkter Einwirkung des Lichts der Polymerisationslampe schützen.
- Spritze und Schutzkappe nach jedem Gebrauch mit Alkohol desinfizieren, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Anschließend die Verschlusskappe fest wieder anbringen. Achtgeben, dass kein Alkohol in die Paste gelangt.
- Die Polymerisationslampe nach jedem Gebrauch mit Alkohol desinfizieren, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

5. Direktes Komposit auftragen und licht härten. Anschließend konturieren, finieren und polieren. Die Gebrauchsanleitung des Herstellers des direkten Restaurationsmaterials beachten.

INWEISE ZUM GEBRAUCH


- Bei allen zusammen mit diesem Produkt verwendeten zahnärztlichen Materialien oder Instrumenten die Gebrauchsanleitung beachten
- Das Produkt ausschließlich für die in diesem Beipackzettel genannten Aufgaben verwenden.
- Das Produkt nur bis zu dem auf Packung oder Behälter angegebenen Verfallsdatum benutzen. (Beispiel □ JJJJ-MM-TT → Jahr-Monat-Jahr Verfallsdatums)

LAGERUNG

- Bei Zimmertemperatur (1-30 °C) dunkel lagern. Hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Zündquellen fernhalten.
- Die gebrauchte Kanüle entsorgen und dieses Produkt wahlweise wie folgt lagern.
 - Neue Kanüle aufsetzen. Die Kanüle in die schmale Öffnung im Kopf der Schutzkappe schieben (Fig. C).
 - Die Schutzkappe fest wieder aufsetzen (Fig. D).

REMARKUES

- Suivre les instructions du fabricant pour chaque matériau ou instrument utilisé durant la mise en œuvre de ce produit.
- Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles mentionnées au chapitre Indications du présent mode d'emploi.

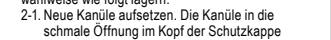

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE
Matériau de restauration fluide à libération de fluor pour opaque

BEAUTIFIL OPAQUER est un matériau de restauration servant à masquer les décolorations, les taches et la couleur des métaux ainsi qu'à protéger la pulpe.

TEINTES
ÜO (Universal Opaque), LO (Light Opaque)

COMPOSITION
Bis-GMA, TEGDMA, Charge S-PRG à base de verre fluorbororaluminosilikate, initiateur de polymérisation, pigments et divers

INDICATIONS

- Masquage de dents décolorées ou tachées
- Masquage de la couleur de métaux
- Masquage d'agent de protection pulpaire

PRECAUTIONS

- Ne pas utiliser ce produit pour des patients allergiques à ce matériau ou aux monomères acryliques.
- De même le personnel allergique à ces produits ne devra pas les manipuler.
- Si, lors de l'utilisation du produit, le patient ou l'opérateur présente une inflammation ou autre réaction allergique, interrompre l'opération et consulter un médecin.
- Porter des gants et des lunettes de protection afin d'éviter toute sensibilisation. En cas de contact accidentel avec les tissus mous, la peau ou un vêtement, essuyer avec un coton imbibé d'alcool et rincer à l'eau courante. Bien que les gants médicaux protègent du contact direct, certains monomères peuvent les traverser. Si c'est le cas, ôter immédiatement les gants, se laver les mains à l'eau courante.
- En cas de contact oculaire, rincer à l'eau et contacter un médecin.
- Ce produit est exclusivement réservé à un usage dentaire professionnel.

MODE D'EMPLOI

- Préparation du matériau destiné à recevoir l'adhésif
Procéder au traitement préparatoire approprié pour chaque matériau (composite, céramique, métal ou dent naturelle).
 - Suivre les instructions pour chaque matériau de traitement préparatoire.
- Mise en place de l'aiguille
Suivre les instructions ci-dessous pour mettre en place l'aiguille BEAUTIFIL fournie.
 - Oter le capuchon en dévissant doucement dans le sens indiquée. (Fig.A)
 - Enfoncer l'aiguille en vissant jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. (Fig.B)
 - Porter des gants médicaux propres lors du remplacement de l'aiguille.

Appliquer une quantité nécessaire de BEAUTIFIL OPAQUER directement sur le matériau destiné à recevoir l'adhésif. Avec BEAUTIFIL OPAQUER, on peut aussi déposer le produit sur un bloc de mélange.

- S'il est stocké au réfrigérateur, laisser le matériau atteindre la température ambiante avant usage.
- La pâte sur le bloc de mélange doit être protégée de la lumière ambiante pour éviter un début de polymérisation indésirable.
- BEAUTIFIL OPAQUER doit être appliqué sur une épaisseur aussi faible que possible (0,5 mm ou moins)
- Les aiguilles sont à usage unique et donc à jeter après chaque intervention, pour éviter la contamination croisée.

Photopolymérisation
Photopolymériser avec une lampe de cabinet

- Lors d'une application épaisse, il est nécessaire de procéder au placement incrémental et à la photopolymérisation.
- Lorsque la surface de la cavité ou la zone à réparer est importante, photopolymériser en segments.
- Lampe à photopolymériser et temps d'insolation

Type de lampe	Halogène	LED
Durée de polymérisation	40 s	20 s
Longueur d'onde	400-500 nm	440-490 nm
Puissance lumineuse	≥ 500mW/cm ²	≥ 1000mW/cm ²

- Utiliser une lampe de cabinet aux spécifications identiques à celles indiquées plus haut. Si une lampe présente des performances différentes de celles décrites, suivre son mode d'emploi pour polymériser correctement BEAUTIFIL OPAQUER.
- Utiliser des lunettes de protection et éviter de regarder directement la lumière de la lampe à polymériser. Les opérateurs doivent aussi protéger les yeux du patient d'une exposition directe à la lumière de la lampe à polymériser.
- Desinfecter à l'alcool la seringue et le capuchon protecteur après chaque patient pour éviter la contamination croisée. Puis reboucher soigneusement. User de prudence pour éviter de mettre de l'alcool dans la pâte.
- Desinfecter à l'alcool la lampe à polymériser après chaque patient pour éviter la contamination croisée.

5. Remplir de résine composite directe et photopolymériser. Puis procéder au modelage, à la finition et au polissage.
Suivre les instructions du fabricant du matériau de restauration.

REMARKUES

- Suivre les instructions du fabricant pour chaque matériau ou instrument utilisé durant la mise en œuvre de ce produit.
- Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles mentionnées au chapitre Indications du présent mode d'emploi.

5. Utiliser ce produit avant la date d'expiration indiquée sur l'étiquette et l'emballage.
(Exemple □ AAAA-MM-JJ → Année-Mois-Jour de la date d'expiration)

STOCKAGE

- Conserver à température ambiante (1-30 °C) dans un endroit sombre. Éviter toute température ou humidité élevée. Ne pas approcher d'une source lumineuse intense ou d'une flamme.
- Jeter l'aiguille usagée et conserver ce produit de l'une des manières suivantes.
 - En fixer une nouvelle. Insérer l'extrémité de l'aiguille dans le petit trou du capuchon. (Fig.C)
 - 2-2. Replacer le capuchon protecteur. (Fig.D)



NL LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK

Fluorid afgevend vloeibaar restauratiemateriaal voor opak

BEAUTIFIL OPAQUER is een lichtuithardend opak materiaal bestemd voor het maskeren van verkleurde of gevlekte tanden, metaalkleuren en afdekmiddelen van de pulpa.

KLEUREN
ÜO (universeel opak), LO (licht opak)

SAMENSTELLING
Bis-GMA, TEGDMA, S-PRG vulstof op basis van fluorbororaluminosilikaatglas, polymerisatie-initiator, pigmenten en andere

INDICATIES

- Maskeren van verkleurde of gevlekte tanden
- Maskeren van metaalkleur
- Maskeren van afdekmiddelen van de pulpa

VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik dit product niet bij patiënten met een bekende allergie voor dit materiaal en/of methacrylaatmonomeer.
- Gebruikers met een bekende allergie voor dit materiaal en/of methacrylaatmonomeer mogen dit product niet gebruiken.
- Als een ontsteking of een andere allergische reactie ontstaat bij de patiënt of de gebruiker dient het product onmiddellijk te worden gestopt en moet medisch advies worden ingewonnen.
- Gebruik medische (dentale) handschoenen en een beschermbril om de ontwikkeling van gevoeligheid voor dit product te voorkomen. Bij accidenteel contact met orale zachte weefsels of met de huid moet onmiddellijk met een met alcohol bevochtigde wattenpellet worden gedrukt en met ruim water worden gespoeld. Medische (dentale) handschoenen bieden enige bescherming tegen direct contact met dit materiaal; sommige monomeren kunnen echter zeer snel door de handschoenen penetreren en de huid beseiden. Derhalve moeten, mocht het materiaal in aanraking komen met de handschoenen, deze onmiddellijk worden uitgetrokken en moeten de handen met ruim water worden gewassen.

5. Bij contact met de ogen moeten deze onmiddellijk met ruim water worden gespoeld en moet medisch advies worden ingewonnen.

6. Dit product is bedoeld om uitsluitend door tandartsen te worden gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voorbehandeling van het te hechten materiaal
Voer de geschikte voorbehandeling uit voor elk te hechten materiaal (composit, porselein, metaal of natuurlijke tand).
 - Volg de instructies van elk materiaal voor de voorbehandeling.
- Plaatsen van de naaldtip
Volg onderstaande instructies om de meegeleverde BEAUTIFIL naaldtip te plaatsen.
 - Neem de beschermkap af door deze langzaam te draaien. (Fig. A)
 - Plaats de naaldtip door deze met de klok mee te draaien totdat hij stevig is bevestigd. (Fig. B)
 - Draag schone medische (dentale) handschoenen bij het vervangen van de naaldtip.

3. Toepassing
Brenge de benodigde hoeveelheid BEAUTIFIL OPAQUER direct aan op het te hechten materiaal. BEAUTIFIL OPAQUER kan ook op een papieren mengblok worden geplaatst om met een geschikt instrument toe te passen.

- Laat, wanneer deze materialen in de koelkast worden bewaard, ze alvorens te gebruiken op kamertemperatuur komen.
- Het op het mengblok gedispenseerde materiaal moet met een lichtafdekking tegen omgevingslicht worden afgeschermd om voortijdige polymerisatie te voorkomen.

4. Uitharden onder licht
Hard ut onder licht met een dentale polymerisatielamp.

- Bij dikke toepassing moet u werken met incrementele plaatsing en lichtuitharding.
- Als het caviteitoppervlak of het te repareren oppervlak groot is, moet u segmenten uitharden.
- Dentale polymerisatielamp en -tijd

Polymerisatie-lamp	Halogeen	LED
Duur polymerisatie	40 sec.	20 sec.
Golflengte	400-500 nm	440-490 nm
Lichtintensiteit	≥ 500 mW/cm ²	≥ 1000 mW/cm ²

- Gebruik een dentale polymerisatielamp waarvan de specificaties overeenkomen met de hierboven genoemde waarden.

Volg bij gebruik van een polymerisatielamp met afwijkende specificaties de gebruiksaanwijzing ervan om BEAUTIFIL OPAQUER correct uit te harden.

- De gebruiker moet een beschermbril of een lichtafdekking gebruiken om te voorkomen dat direct in het licht van de polymerisatielamp gekeken kan worden. De gebruiker dient ook de ogen van de patiënt te beschermen tegen directe blootstelling aan het licht van de polymerisatielamp.
- Desinfecteer de doseerspuit en de beschermkap na elk gebruik met alcohol om kruisbesmetting te voorkomen. Sluit vervolgens de kap stevig.
- Wees voorzichtig en voorkom dat er alcohol in het materiaal terecht komt.
- Desinfecteer de polymerisatielamp na elk gebruik met alcohol om kruisbesmetting te voorkomen.


5. Vul direct composiet in laat uitharden onder licht. Daarna contoureren, afwerken en polijsten.
Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het restauratiemateriaal.

AANWIJZINGEN BIJ HET GEBRUIK

- Volg voor elk materiaal of instrument dat in combinatie met dit product wordt gebruikt de betreffende gebruiksaanwijzing.
- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan degene die expliciet in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd.
- Gebruik dit product niet na de vervaldatum die op de verpakking of het flesje staat. (Bijvoorbeeld □ JJJJ-MM-DD → Jaar-Maand-Dag van de uiterste gebruiksdatum).

OPSLAG

- Bewaer op een donkere plek op kamertemperatuur (1-30 °C). Vermijd hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Stel niet bloot aan direct zonlicht of ontstekingsbronnen.
- Goed gebruikte naaldpunten weg en bewaar dit product op een van de volgende wijzen.
 - 2-1. Nieuwe bevestiging. Steek de naald in het kleine gat bovenaan de beschermkap. (Fig. C)
 - 2-2. Plaats de beschermkap stevig terug. (Fig. D)

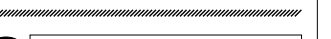

ES LEER CUIDADOSAMENTE ANTE DE USARLO

Materiaal de restauración fluído opaco

BEAUTIFIL OPAQUER es un material fotopolimerizable y opaco que permite cubrir los dientes decolorados o manchados, y el color del metal y agentes de recubrimiento pulpar.

TONOS
ÜO (Opaco Universal), LO (Opaco Claro)

COMPOSICIÓN
Bis-GMA, TEGDMA, relleno S-PRG a base de vidrio de fluorbororaluminosilikato, iniciador de la polimerización, pigmentos y otros

INDICACIONES

- Cubrimiento de dientes decolorados o manchados
- Cubrimiento del color del metal
- Cubrimiento del protector pulpar

PRECAUCIONES

- No usar este producto en pacientes con alergias conocidas a este material y/o al monómero de metacrilato.
- Los profesionales con alergias conocidas a este material y/o al monómero de metacrilato no deben usar este producto.
- Si apareciera inflamación o cualquier otra reacción alérgica en el paciente o el profesional mientras se está utilizando este producto, parar su uso inmediatamente y buscar ayuda médica.

4. Usar guantes médicos (dentales) y gafas protectoras para evitar la sensibilización a este producto. En caso de contacto accidental con el tejido blando oral o la piel, limpiar inmediatamente con una bolita de algodón humedecida en alcohol y lavar con gran cantidad de agua. Los guantes médicos (dentales) proporcionan agua de protección contra el contacto directo con este material; sin embargo algunos monómeros pueden penetrar a través de los guantes muy rápidamente hasta alcanzar la piel. Por tanto, si el material contactara con los guantes, quítárselos inmediatamente y lavarse las manos con gran cantidad de agua.

5. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con gran cantidad de agua y buscar ayuda médica.

6. Este producto está fabricado para uso solo por profesionales dentales.

INSTRUCCIONES DE USO

- Tratamiento previo del material a adherir
Realizar el tratamiento previo adecuado en cada uno de los materiales a adherir (resina compuesta, porcelana, metal o diente natural).
 - Seguir las instrucciones pertinentes de cada material de tratamiento previo.
- Colocación de la aguja
Seguir las instrucciones de abajo para ajustar la aguja BEAUTIFIL proporcionada.
 - 2-1. Tirar del tapón a la vez que se gira lentamente. (Fig. A)
 - 2-2. Ajustar la aguja girándola en sentido de las agujas del reloj hasta que esté bien ajustada. (Fig. B)
 - 2-3. Usar guantes médicos (dentales) limpios al sustituir la aguja.

3. Aplicación
Aplicar la cantidad necesaria de BEAUTIFIL OPAQUER directamente en el material a adherir. BEAUTIFIL OPAQUER también se puede dispensar en un papel de mezcla para ser aplicado con un instrumento adecuado.

Quando o material está guardado en a nevera, esperar a que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.

- La pasta dispensada en el papel de mezcla debe protegerse de la luz ambiente con una cubierta de protección de la luz para evitar la polimerización del material.
- Aplicar una capa de BEAUTIFIL OPAQUER lo más fina posible (0,5 mm o menos).
- Las agujas se deben usar para un solo paciente y luego desecharlas al final del procedimiento para evitar la contaminación cruzada.

4. Fotopolimerización
Fotopolimerizar con una lámpara dental de fotopolimerización.

- Si se aplica una capa gruesa, debe realizarse una colocación incremental y una fotopolimerización.
- Si la superficie de la cavidad o el área a reparar es grande, fotopolimerizar por segmentos.
- Lámpara dental de fotopolimerización y tiempo de fotopolimerización

Unidad de fotopolimerización	Halógena	LED
Tiempo de fotopolimerización	40 segundos	20 segundos
Longitud de onda	400-500 nm	440-490 nm
Intensidad de luz	≥ 500 mW/cm ²	≥ 1000 mW/cm ²

- Usar una lámpara dental de fotopolimerización con las mismas especificaciones que aquellas descritas anteriormente.
- Si se usa otro tipo de lámpara de fotopolimerización, seguir las instrucciones de cada una para fotopolimerizar correctamente el BEAUTIFIL OPAQUER.
- Los operadores deben usar gafas protectoras o plástico protector para evitar mirar directamente a la luz de fotopolimerización. Los operadores también deben proteger los ojos del paciente para evitar su exposición directa a la luz de fotopolimerización.
- Desinfectar la jeringa y el tapón con alcohol después de cada uso para evitar la contaminación cruzada. A continuación, cerrar correctamente el tapón. Proceder con cuidado para evitar que penetre alcohol en la pasta.
- Desinfectar la lámpara de fotopolimerización con alcohol después de cada uso para evitar la contaminación cruzada.

5. Rellenar con resina compuesta directa y fotopolimerizar. A continuación, contornear, terminar y pulir. Seguir las instrucciones de uso del fabricante del reconstituyente directo.

NOTA DE USO

- Seguir las instrucciones de uso de cada material dental o instrumento que se va a usar junto con este producto.
- No usar este producto para ningún otro propósito que no este especificado en estas instrucciones de uso.
- Usar este producto antes de la fecha de caducidad indicada en el paquete o embalaje.
(Ejemplo □ AAAA-MM-DD → Año-Mes-Día de la fecha de caducidad)


ALMACENAJE

1. Almacenar en un lugar oscuro a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitar temperatura y humedad altas. Mantenerlo alejado de la luz directa del sol y de cualquier fuente de calor.

2. Desechar la aguja usada y almacenar el producto de cualquiera de las siguientes formas.

2-1. Colocar una aguja nueva. Insertar la aguja en el hueco de la cabeza del tapón. (Fig. C)

2-2. Colocar de nuevo el tapón. (Fig. D)

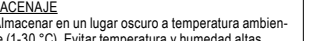

IT LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Materiale ricostruttivo opacizzante fluído a rilascio di fluído

BEAUTIFIL OPAQUER è un opaco fotopolimerizzabile indicato per mascherare denti discromici o macchiati, il colore del metallo e il materiale usato per l'incappucciamento pulpare.

COLORI
ÜO (Universal Opaque, opaco universale), LO (Light Opaco, opaco chiaro)

COMPOSIZIONE
Bis-GMA, TEGDMA, riempitivo S-PRG a base di vetro silicato di alluminio fluoroborico, iniziatore della polimerizzazione, pigmenti e altro

INDICAZIONI

- Mascheratura di denti scoloriti o macchiati
- Mascheratura del colore del metallo
- Mascheratura di prodotti per l'incappucciamento pulpare

MISURE DI SICUREZZA

- Non usare questo prodotto su pazienti con allergie note al materiale e/o al monomero metacrilato.
- Il prodotto non deve essere usato da operatori con allergie note al materiale e/o al monomero metacrilato.
- Se un paziente o un operatore dovesse presentare infiammazioni o altre reazioni allergiche, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico.
- Indossare quanti protettivi medici e occhiali protettivi per evitare la sensibilizzazione a questo prodotto. In caso di contatto accidentale con i tessuti molli della cavità orale o con la pelle, pulire immediatamente con un batuffolo di cotone imbevuto d'alcol e risciacquare abbondantemente con acqua. I guanti protettivi medici forniscono protezione dal contatto diretto con il prodotto, ma alcuni monomeri possono penetrare molto velocemente attraverso il guanto e arrivare alla pelle. Qualora il prodotto entrasse a contatto con i guanti, toglierli immediatamente e lavare le

