

Solidilite V & Sublite V


ESTETICA VERDADERA



LAMPARAS DE POLIMERIZACION



Visitenos www.shofu.com o llámenos al +1 760 736-3277

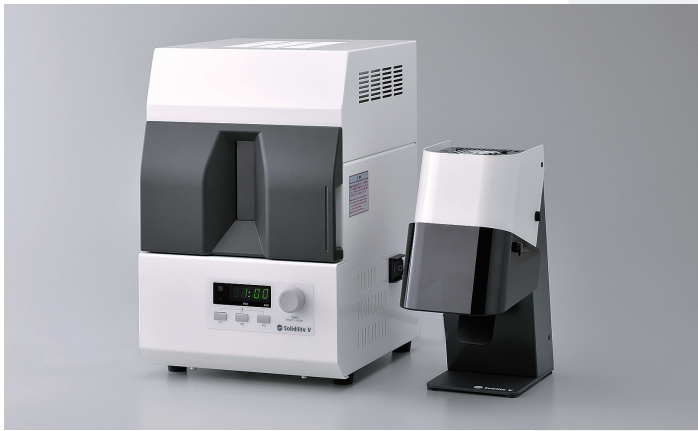

LUZ DE ALTO RENDIMIENTO TECNOLOGIA OPTIMA PARA CERAMAGE® Y SOLIDEX®

Aumenta al máximo la intensidad y rendimiento del trabajo en su laboratorio, procesando restauraciones indirectas de resina/composito y fotopolimerizando acrílicos con la unidad Solidilite V y la lámpara de uso fácil Sublite V para curar capas mínimas y ligadas.

SOLIDILITE V

La nueva lámpara Shofu, Solidilite V cuenta con una amplia cámara de polimerización y programas preestablecidos fáciles de usar. Los programas son por un minuto P1, tres minutos P2 y cinco minutos P3. Esta unidad de fotocurado tiene cuatro potentes luces halógenas JCR 110v 150W/S ubicadas estratégicamente dentro de la cámara y un plato giratorio para una polimerización rápida, eficaz y libre de sombras. Solidilite V se adapta a diferentes tipos de voltage (100 to 240v, 50-60Hz) simplemente girando el botón que se encuentra en la parte posterior de la unidad.



SUBLITE V

La lámpara Sublite V está diseñada para iniciar una rápida polimerización con un toque fácil. La luz se activa con un toque ligero que irradia por cinco segundos, si continúa presionando el botón la irradiación durará por 20 segundos y se apagará automáticamente. Con su diseño compacto (W4½ x D5 x H10 inches) permite que la unidad sea cómodamente colocada en un lugar cerca al área de trabajo.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

Voltage compatible	Se adapta al voltage 100-240v (50-60 Hz)
Programas múltiples (1 min., 3 min. y 5 min.)	Un botón de Inicio
Ajuste manual	Establezca sus propios programas
Iluminación libre de sombra	Polimerización rápida y completa
Pantalla LED de 7 segmentos	Indicador visible de el tiempo restante
Control manual para subir/bajar la plataforma	Ajustes fáciles y precisos
Indicador de vida de bombillos	Detecta bombillos fundidos
Fácil reemplazo de bombillos	Ahorra y reduce tiempo de inactividad
Medidas de Solidilite (W9 x D9¾ x H13½ in.)	Cabe fácilmente en el área de trabajo
Sublite ajustable y liviano	Posición adecuada para operar fácil
Medidas de Sublite (W4½ x D5 x H10 in.)	Cabe fácilmente en el área de trabajo



SOLIDILITE V (PN 5105)

SUBLITE V (PN 5107)



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan (www.shofu.co.jp)
SHOFU INC. Singapore Branch 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 (www.shofu.com.sg)
SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China (www.shofu.com.cn)
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA (www.shofu.com)
SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK (www.shofu.co.uk)
SHOFU DENTAL GmbH   Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)
SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.
 © Copyright 2012 SHOFU INC. All rights reserved.

